

User manual

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Mia



Rialzo wc Mia

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Vermeiren. Questo manuale viene fornito come supporto per l'uso del prodotto. Leggerlo attentamente. Per eventuali ulteriori domande successive alla lettura di questo manuale, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Sul sito Web di Vermeiren, all'indirizzo <http://www.vermeiren.com/> è sempre disponibile la versione più recente delle informazioni indicate di seguito. Visitare con regolarità tale sito per verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti. Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere da un software applicativo di sintesi vocale.

1 Alla consegna

Disimballare il prodotto e verificare che sia completo. Devono essere presenti le parti seguenti:

- 1 rialzo wc con coperchio
- 2 supporto di regolazione larghezza
- Optional: cuscino per rialzo
- Manuale

Verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto. Se si rilevano danni dopo la consegna, mettersi in contatto con il proprio fornitore.

2 Montaggio e utilizzo del rialzo wc

**ATTENZIONE**

Rischio di lesioni

- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il rialzo sia posizionato in modo sicuro al wc.
- Per assicurarsi che il rialzo rimanga posizionato correttamente, allentare e stringere i supporti di regolazione larghezza una volta alla settimana.
- Non superare il peso massimo di carico.

Indicazioni e controindicazioni: Il rialzo wc è stato disegnato per regolare l'altezza del wc ad un livello di comfort ottimale, per una facile seduta sullo stesso. ad esempio in caso di: disfunzione degli arti inferiori dovuta a mobilità articolare limitata o assente, ridotta forza muscolare degli arti inferiori, danni alla colonna vertebrale lombare, danni al sistema nervoso... L'obiettivo di questo prodotto è quello di consentire l'uso indipendente o più indipendente della toilette. Se utilizzato in


modo appropriato, non sono note controindicazioni.

Mia è disponibile in due diverse altezze: 10 cm o 15 cm.

Il peso massimo di carico dell'utilizzatore è di 225 kg.

Per posizionare Mia:

1. Rimuovere il vostro attuale sedile e coperchio del wc.
2. Inserite i due supporti di regolazione larghezza (1) nel rialzo wc. Avvitare la manopola a stella in senso orario per ridurre leggermente la larghezza.
3. Posizionate il rialzo wc [A] con il bordo anteriore (2) all'esterno.
4. Spingete il rialzo wc verso la parte posteriore [B] il più possibile.
5. Stringete i supporti di regolazione larghezza (1) con le mani.

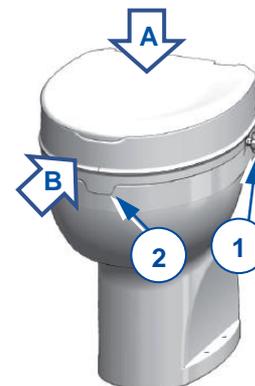

Per posizionare il cuscino optional, togliete il coperchio del rialzo.

Appoggiatevi dolcemente sul rialzo wc piegando i gomiti, anche e ginocchia se possibile. Non aggrapparsi al rialzo quando Vi appoggiate o sollevate dal rialzo stesso.

3 Manutenzione

Il rialzo wc è costruito con componenti in plastica. Il rialzo wc Mia può essere pulito e disinfettato con un prodotto di pulizia normale per la casa. Evitate l'utilizzo di prodotti di pulizia aggressivi che possono causare scolorimento delle parti.

3.1 Durata di vita prevista

Il rialzo wc Mia è progettato per una durata media di 5 anni.

4 Specifiche tecniche

Marca	Vermeiren
Tipo	Rialzo wc
Modello	Mia

Descrizione	Dimensioni
Carico massimo	225 kg
Altezze previste	100 mm 150 mm
Larghezza	365 mm
Lunghezza	405 mm
Temperatura di magazzinaggio	+5°C - +41°C

Vermeiren si riserva il diritto di introdurre modifiche tecniche. Tolleranze di misurazione +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

sito web: www.vermeiren.com

Istruzioni per il rivenditore

Il presente Manuale di istruzioni è parte integrante del prodotto e deve essere fornito assieme alla prodotto.

Versione: B, 2022-07

Basic UDI: 5415174 120903Mia GW

Tutti i diritti riservati (anche sulla traduzione).