



Verso

Fauteuil roulant
**électrique léger
et adaptable**

VERMEIREN
we care for you

Verso

Fauteuil roulant électrique léger et adaptable

Le Verso est un fauteuil roulant électrique polyvalent. Son poids léger en fait le fauteuil idéal pour les utilisateurs très mobiles, tout en garantissant un confort optimal. Grâce à notre large gamme d'options, le Verso s'adapte de façon remarquable à chaque utilisateur. Alliant la légèreté d'un châssis de fauteuil manuel avec les fonctions avancées de ses deux roues motorisées électriquement, le Verso est un choix parfait pour ceux qui recherchent à la fois du confort et de la légèreté sur un fauteuil roulant électrique. La batterie Lithium peut être retirée facilement pour le chargement ce qui le rend encore plus pratique.

VERMEIREN
we care for you







LE VERSO INCLUT DE SÉRIE

Un coussin avec
revêtement en 3D Net
(nid d'abeille)

Des repose-pieds
escamotables et
amovibles ajustables
en hauteur

Des accoudoirs amovibles
et réglables

Des poignées
réglables en hauteur

Un dossier réglable
en hauteur et en
tension avec 4
sangles de réglage

Une batterie lithium
amovible avec
verrouillage de sécurité



Une profondeur d'assise
réglable de 42 à 48 cm

FACILE À UTILISER

Le Verso ne fait pas de compromis en étant à la fois très complet mais simple à utiliser. Démontable, ses différentes parties sont faciles à soulever et à mettre dans le coffre d'une voiture.

L'assemblage est simple et rapide avec notre système Click&Drive. Aucun outil n'est nécessaire, il suffit de connecter la batterie et vous êtes prêt à partir ! Grâce à sa batterie amovible, il est possible de charger le Verso où vous le souhaitez!



Le Verso est compatible avec le transport aérien!


Pour cela il suffit de désactiver la batterie. Bon vol!
Votre fauteuil est conforme à la réglementation IATA pour les PMR. Se référer au manuel d'utilisation pour plus d'informations sur le transport aérien ou contactez la compagnie aérienne.

VOTRE COMPAGNON DE VOYAGE

Le Verso dispose d'une caractéristique unique : un moteur et un bloc batterie détachables.

Séparez votre fauteuil de son bloc arrière comprenant la batterie et les roues motorisées, le fauteuil devient alors ultra-compact pour le stockage ou le transport. La partie avant comme la partie arrière disposent d'une roulette supplémentaire pour éviter que l'une ou l'autre ne soit endommagée pendant le démontage. Cela facilite également la manœuvre.

Le châssis peut également être plié comme vous le feriez pour n'importe quel fauteuil roulant manuel. Idéal pour le transport en voiture ou pour être rangé chez vous.

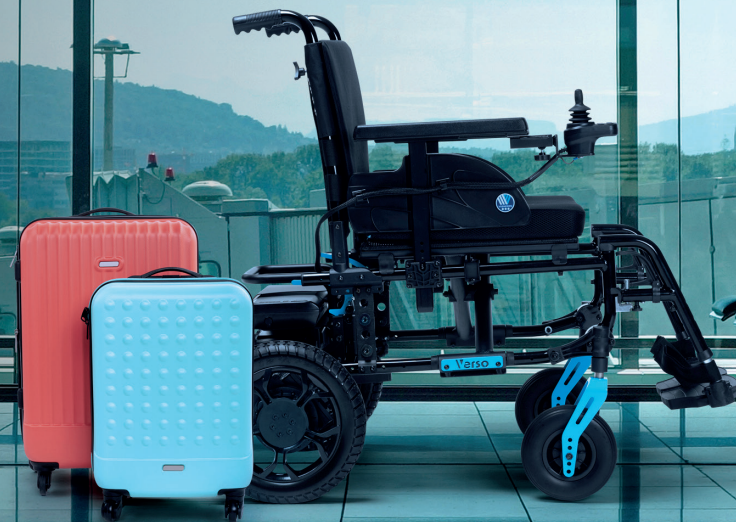

LÉGÈRETÉ

31,3 kg

Poids total



9,9 kg

Poids de transport
(sans coussin, repose-pieds et accoudoirs)



16,2 kg

Partie la plus lourde



Vermeiren prend soin de vous... et de votre dos !

Le Verso est un fauteuil roulant électrique extrêmement léger avec un poids de seulement 16,2kg pour la partie motorisée et un poids de transport de 9,9kg pour le châssis.





EXPÉRIENCE DE CONDUITE



Commande

La commande **P&G** est simple et intuitive. Avec son indicateur de niveau de batterie, son variateur de vitesse et un joystick agréable à utiliser, elle est très facile à prendre en main. Une programmation est possible pour personnaliser quelques paramètres et adapter la conduite à votre profil.

La commande se détache facilement lors du démontage du **Verso**.



Jusqu'à 21km

Choisissez la batterie qui convient à votre style de vie : Profitez d'un rayon d'action de 15 km avec la batterie standard de 12,8Ah ou d'une autonomie étendue grâce à sa batterie de 17,5Ah en option.



6 km/h

Avec sa vitesse de 6km/h le Verso vous permet de conduire à une vitesse parfaite pour une ballade avec votre famille ou vos amis.



BATTERIE & MOTEUR

La batterie Lithium Li-ion très légère dispose d'un indicateur de niveau de charge. Déverrouillez la facilement grâce à sa clé anti-vol et chargez là où vous le voulez. Besoin de plus d'autonomie ? il est également possible de commander une batterie additionnelle en option.

La batterie se situe à l'arrière du fauteuil. Elle est facilement accessible pour vérifier son niveau de charge ou pour être retirée.

Avec ses moteurs 2 x 250 W et sa paire de pneus 12", le Verso est un des produits les plus compétitifs de sa gamme. C'est le choix idéal pour quiconque recherche un fauteuil roulant électrique léger.

Batterie Li-ion
amovible

12,8 Ah – 24 V (standard)
17,5 Ah – 24 V (en option)

Moteurs
2 x 250 W





A close-up photograph of a bicycle handlebar. The handlebar is black with a blue rectangular plate in the center that has the word 'Verso' written on it in a stylized, bold font. The background is blurred, showing other parts of the bicycle, including a blue brake lever and a black frame. The lighting is dramatic, highlighting the textures and colors of the components.

DESIGN & COLORIS

Les accents de couleur notamment sur les fourches et les leviers, apportent une touche supplémentaire à son design attractif.

COLORIS

Les coloris (noir ou blanc) peuvent être combinés avec les accents de couleur afin de créer le Verso qui vous convient.

Choisissez la couleur de votre cadre entre le blanc brillant et le noir brillant et jouez avec les accents de couleur pour créer votre propre style.

Accents de couleur

• Verso •

bleu clair

• Verso •

vert clair

• Verso •

orange clair

• Verso •

blanc





HAUTEMENT CONFIGURABLE

Adaptez le Verso à vos besoins. Le Verso dispose de nombreux réglages qui peuvent être complétés d'options que nous avons créées grâce à notre grande expérience.

2 en 1

CONVERTISSEZ LE **VERSO** EN FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Kit roues arrières 24"

Le **Verso** vous offre la possibilité de se transformer en un clin d'œil en fauteuil roulant manuel grâce à son kit de roues arrières 24".



Sac de transport en option



OPTIONS

Avec sa large gamme d'options, le Verso répondra à tous vos besoins ainsi qu'à ceux de votre accompagnant. Configurez votre modèle grâce à notre gamme d'équipements !

Gamme de manchettes hémiplégiques



Cale-tronc latéral




Appui-tête ajustable en hauteur, profondeur et translation - L58C



Coussin de dossier préformé - L34



Coussin d'assise anatomique préformé - L35

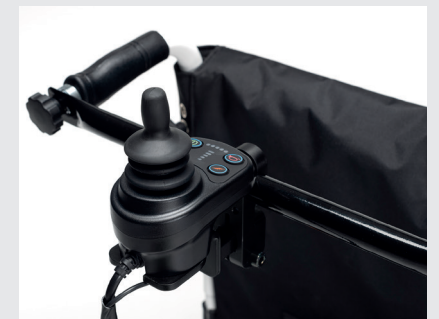

Fixation de commande à l'arrière - SE08

Pour plus d'options, consulter le bon de commande.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Largeur totale	Largeur d'assise + 17cm
■ Longueur totale	1078 mm
■ Hauteur d'assise	521 mm
■ Largeur d'assise	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Profondeur d'assise	420 à 480 mm
■ Hauteur de dossier	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Batteries	12,8 Ah - 24 V 17,5 Ah - 24 V
■ Puissance	2 x 250 W
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	15 km 21 km
■ Poids	31,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg

* Mesures en mm et en kg. Des écarts de taille et de poids (15 mm et 1,5 kg) sont possibles sous réserve de modifications techniques. Les images ne servent qu'à des fins d'illustration. Certaines caractéristiques peuvent être optionnelles.



Verso

Fauteuil roulant
électrique léger
et adaptable

VERMEIREN France SAS

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations, prenez contact
avec votre revendeur local.

