

FALCON

Lève-Personne



VERMEIREN
we care for you



Falcon, le choix de la sécurité

Un mix parfait entre sécurité et technologie. Falcon permet de transférer les patients facilement et confortablement. Les 2 freins assurent le blocage des roues pour une sécurité

optimale durant le transfert. Grâce à sa conception, les manœuvres du Falcon deviennent fluides pour le patient et l'accompagnant.

Seulement 48 secondes entre la position la plus basse et la position la plus haute

Indicateur d'état de la batterie

Avertissement sonore lorsque la batterie est très faible



Protection en néoprène sur la barre de préhension et 4 crochets pour une meilleure stabilité.



Poignées de poussée ergonomique



Contrôleur avec indicateur d'état de la batterie

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Falcon** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Des produits conçus pour vous


VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



Démontable pour faciliter le transport et le stockage

Sangles en option


STANDARD

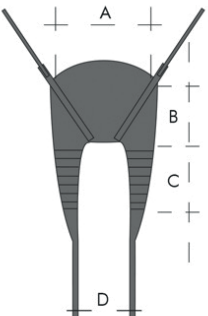

Disponible en
M - L - XL (tailles en mm)

	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440


CONFORT

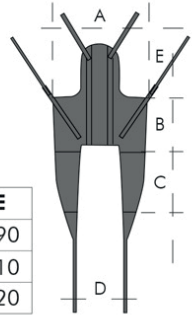

Disponible en
M - L - XL (tailles en mm)

	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420

HYGIÉNIQUE

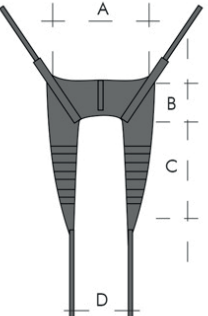

Disponible en
M - L - XL (tailles en mm)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



Sangles en option - tissu



Polyéthylène

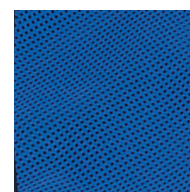

Net Polyester

Caractéristiques techniques

■ Position la plus profonde du PAC*	509 mm
■ Hauteur maximale du PAC*	1609 mm
■ Plage de levage (portée en hauteur)	1100 mm
■ Longueur totale	1158 mm
■ Largeur totale (fermé)/(ouvert)	565 - 1026 mm
■ Longueur plié	1236 mm

■ Hauteur plié	294 mm
■ Largeur plié	565 mm
■ Rayon de braquage	1188 mm
■ Poids	35 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* PAC = Point d'ancrage central

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

