



# Verso

Carrozzina elettronica  
leggera ed adattabile

**VERMEIREN**  
we care for you

# Verso

## Carrozzina elettronica leggera ed adattabile

Verso è una carrozzina elettronica versatile e agile. Il suo design leggero la rende una carrozzina perfetta per gli utenti attivi che desiderano aumentare la propria mobilità ma senza rinunciare al comfort.

Grazie alla nostra vasta gamma di opzioni, Verso offre al suo utilizzatore una notevole adattabilità. E' realizzata unendo la resistenza di un telaio per carrozzina manuale con le caratteristiche all'avanguardia di due ruote posteriori motorizzate, Verso è la scelta perfetta per una carrozzina elettronica comoda e leggera. La batteria al litio può essere rimossa per una facile e veloce ricarica atta a migliorare la praticità nell'uso quotidiano.

**VERMEIREN**  
we care for you







# PACCHETTO STANDARD



Braccioli estraibili e regolabili

Maniglie di spinta regolabili in altezza - 5 posizioni

Schienale regolabile in altezza con 4 cinghie per la regolazione della tensione

Imbottitura cuscino 3D NET traspirante

Pedane pieghevoli ed estraibili, regolabili in lunghezza

Batteria al litio estraibile, dotata di chiusura di sicurezza

Profondità della seduta regolabile da 42 a 48 cm

# FACILE DA USARE

Semplice, ma perfetta. Verso ha tutto. Scendi dalla carrozzina in pochi secondi. Tutte le sue componenti sono facili da trasportare e leggere per un agile trasporto in auto.

Il montaggio è semplicissimo grazie al nostro sistema Click&Drive. Non sono necessari attrezzi, basta collegare la batteria e sei pronto per guidare! Grazie alla nostra batteria estraibile, puoi ricaricare la tua sedia quando e dove vuoi.



## Verso è inoltre compatibile con il trasporto aereo!

Basta spegnere la batteria e la tua carrozzina può volare. Fare sempre riferimento al manuale dell'utente per le istruzioni di trasporto.

# FACILE DA PORTARE IN VIAGGIO CON TE

Una caratteristica unica per Verso è il motore estraibile e il blocco batteria. Rimuovi la carrozzina dalla batteria e dal blocco ruote per consentirne un facile ricovero e trasporto. Sia il telaio che il "blocco motore" di **Verso** hanno una ruotina aggiuntiva per assicurarsi che nessun componente possa essere danneggiato dal distacco. Consentono inoltre una facile manovrabilità.

Il sedile può essere facilmente ripiegato come faresti con qualunque altra nostra carrozzina manuale. Perfetta per il trasporto nella cabina dell'auto o per il ricovero in casa.



# LEGGERISSIMA

**31,3 kg**

Peso totale



**16,2 kg**

Motore



**9,9 kg**

Peso di trasporto  
(senza cuscino, poggiatesta e bracciolo)



**Ci prendiamo sempre cura di te... e della tua schiena.**

Verso è una carrozzina elettronica molto leggera con solo 16,2 kg per la parte motorizzata e 9,9 kg per il telaio.

**Facile da sollevare senza alcuno sforzo.**





# ESPERIENZA DI GUIDA



## Comando

Il controller P&G è proprio come piace a **VERMEIREN**, senza fronzoli. Con un indicatore di stato della batteria, un adattatore di velocità e un comodo joystick, questo controller è facile da usare. È anche possibile la programmazione di base per personalizzare la tua esperienza di guida.

Il controller è facilmente staccabile quando si smonta **Verso**.



## Fino a 21 km

Sperimenta un'autonomia di guida prolungata con la batteria da 17,5 Ah. Seleziona la batteria che si adatta al tuo desiderio di evasione.



## 6 km/h

Con 6 km/h, Verso ti consente di guidare alla velocità perfetta per conversazioni e passeggiate confortevoli con i tuoi amici e la tua famiglia.



# BATTERIA - MOTORI

La batteria Lithium Li-ion (disponibile in 12,8 Ah o 17,5 Ah) ha un indicatore di stato della batteria ed è leggera. Sblocca facilmente la batteria con la tua chiave antifurto per ricaricare la batteria ovunque tu voglia. Non c'è tempo per caricare? Una batteria aggiuntiva è disponibile come optional.

La batteria è comodamente posizionata sul retro della carrozzina per un facile accesso quando è necessario rimuoverla per la ricarica o per controllarne rapidamente lo stato.

Con 2 motori da 250 W e pneumatici neri PU da 12 pollici, Verso è in competizione con gli altri nella sua categoria. Un'ottima scelta durevole per una carrozzina elettronica per l'uso quotidiano.

Batteria agli  
ioni di litio  
rimovibile

12,8 Ah - 24 V  
17,5 Ah - 24 V

2 motori  
da 250 W





**CAUTION** Store in cool and dry place!  
Do not expose the product to fire, water or moisture



100%

80%

50%

20%

100%

80%

50%

20%

A close-up photograph of a bicycle handlebar. The handlebar is black and features a bright blue rectangular plate with the word 'Verso' in a stylized, embossed font. The plate is secured with two black screws. The background is blurred, showing the black frame and a blue component of the bicycle.

# DESIGN E COLORE

Con un design elegante e divertenti inserti colorati, Verso può essere adattata ai tuoi gusti avendo un aspetto moderno e attraente. Gli inserti colorati hanno un duplice scopo in quanto consentono di individuare facilmente le leve della parte motorizzata o le forcelle anteriori. Per una maggiore sicurezza abbiamo incluso alcuni riflettori.

# COLORI

I colori sono un'esperienza personale, proprio come la tua Verso. Scegli la combinazione di colori che meglio si adatta al tuo stile.

Scegliete il colore del telaio tra bianco lucido e nero lucido e giocate con gli accenti di colore per creare il vostro stile.

## Disponibile accenti di colore





# ALTAMENTE CONFIGURABILE

Adatta la tua Verso a te. Verso è una carrozzina altamente configurabile che combina l'ampia e vasta gamma di opzioni di **VERMEIREN** e la nostra esperienza nelle carrozzine elettroniche. Scegli quello che fa per te!



# Due in uno

CONVERTI **VERSO** IN UNA CARROZZINA MANUALE

## KIT ruote da 24"


Verso offre un'opzione davvero unica per le persone che necessitano sia di una carrozzina manuale che elettronica. Con il nostro kit ruote da 24" puoi passare facilmente dalla guida manuale a quella motorizzata.

**Collega e guida!**



# OPZIONI

Con una gamma molto ampia di opzioni, Verso è perfetta per soddisfare le esigenze dell'utente e quelle dell'assistente. Configura la carrozzina in base alle tue esigenze con la nostra ampia selezione di opzioni

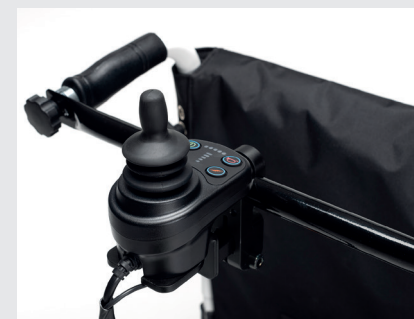

*Più opzioni. Fare riferimento al modulo d'ordine locale.*



## DATI TECNICI

■ Larghezza totale	Larghezza sedile + 17cm
■ Lunghezza totale	1078 mm
■ Altezza sedile	521 mm
■ Larghezza sedile	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Profondità sedile	420 a 480 mm
■ Altezza dello schienale	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Batería	12,8 Ah - 24 V   17,5 Ah - 24 V
■ Motores	2 x 250 W
■ Velocità*	6 km/h
■ Autonomia*	15 km   21 km
■ Peso	31,3 kg
■ Portata massima	130 kg

\* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. \* Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%)



# Versto

Carrozzina elettronica  
leggera ed adattabile

## VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12  
20045 Lainate (MI)  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



E.R.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgio - 12/2023

Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.

**VERMEIREN**  
we care for you