


# Coraille

PER L'INTERNO  
E L'ESTERNO



Asta portaflebo **B52**  
(optional)

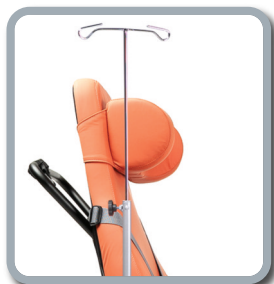

Pedana con appoggia-  
piedi separati **B06**  
(optional)

Appoggiatesta  
imbottito estraibile



**378** - Tavolo opzionale

Cintura di  
sicurezza

Il tavolino ribaltabile lateralmente e regolabile in profondità, è dotato di un dispositivo a sgancio rapido per poterlo rimuovere. Il tavolo rimane in orizzontale indipendentemente dall'inclinazione del sedile.

Freno a pedale

La pedana è montata su una molla che permette di poter appoggiare i piedi durante i trasferimenti.  
(la pedana è estraibile)



Immagini solo a scopo illustrativo. Alcune funzionalità potrebbero essere opzionali.

Mobilità illimitata

## Informazioni tecniche **Altitude**

larghezza totale	larghezza sedile	altezza bracciolo	altezza sedile	altezza totale	altezza schienale	inclinazione del sedile	profondità sedile	lunghezza totale	peso	portata massima
720	385	235/255/275	465/490/515	1295	792/812/832	0°/40°	440/460/480	1090-1640	36	120
	405			1320						
	425			1345						
	445									
	485									

Misure in mm, peso in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5mm e 1,5kg).

## Ridisegnata

Coraille e' fornita in esecuzione standard con il sedile di spessore cm 8. L'altezza dello schienale e dei braccioli varia a seconda dello spessore del sedile (6, 8 ó 10 cm). Montata su un telaio con quattro ruote, le cui posteriori equipaggiate con freno a tamburo azionabile tramite un pedale, le anteriori sono piroettanti.

- Lo schienale, più alto di 3 cm, offre un maggior supporto alle persone alte
- La forma del supporto polpaccio è adattata per dare più spazio alle gambe
- Per facilitare la pulizia tutti i rivestimenti sono rimovibili




Freno a pedale



Il rivestimento è completamente rimovibile

## Colore

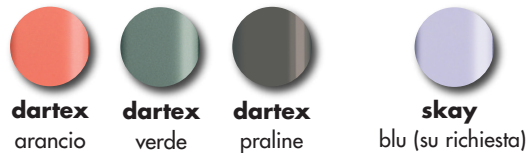

## Opzioni

- Rivestimento in skay
- Sono disponibili larghezze dei sedili più grandi (550, 600 mm)

## Garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina Coraille soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei.

## Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5  
I-20020 Arese MI  
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) - [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

