

# FALCON

Sollevatore elettrico



**VERMEIREN**  
we care for you



*Solo 48 secondi dalla posizione più bassa a quella più alta*

*Stato di carica della batteria*

*Segnale acustico quando la batteria è molto scarica*

### Falcon, una scelta sicura

Un mix perfetto di sicurezza e tecnologia. Falcon permette di trasferire il paziente in modo facile e confortevole. I due freni assicurano il bloccaggio del sollevatore durante la discesa o la salita. Grazie al suo design bilanciato, le manovre diventano facili sia per il paziente che per chi lo assiste.



*Barra di sollevamento con protezione in neoprene e 4 ganci per una migliore stabilità*



*Maniglie di spinta ergonomiche*



*Telecomando con indicatore di carica della batteria.*

### Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, **Falcon** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

### Prodotti pensati per te

**VERMEIREN** cerca sempre di trovare la migliore soluzione disponibile per soddisfare le tue esigenze personali. Siamo al passo con l'avanzare della tecnologia e in tal modo possiamo offrire prodotti più aggiornati. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.



*Smontabile, per un facile trasporto e deposito*


## Imbragature

### REGULAR

Di serie nella misura M

Disponibili nelle taglie  
M - L - XL (misure in mm)


	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440

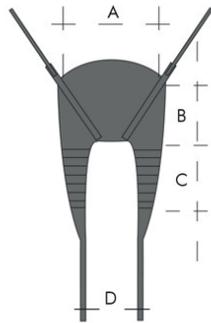

### COMFORT

Disponibili nelle taglie  
M - L - XL (misure in mm)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420

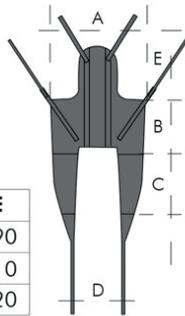

### HYGIENIC

Disponibili nelle taglie  
M - L - XL (misure in mm)


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440

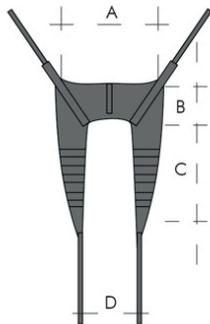

Regular

Sollevatore Falcon disponibile con l'imbragatura Regular di serie. Le altre opzioni sono da specificare nell'ordine.

### Imbragature opzionali - materiali

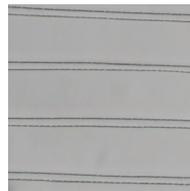

Polietilene



Net Poliestere

### Dati tecnici

■ Posizione più bassa PSC*	509 mm
■ Altezza massima PSC*	1609 mm
■ Area di sollevamento (portata in altezza)	1100 mm
■ Lunghezza totale	1158 mm
■ Larghezza totale (chiuso)/(aperto)	565 - 1026 mm
■ Lunghezza ripiegata	1236 mm

■ Altezza ripiegata	294 mm
■ Larghezza ripiegata	565 mm
■ Raggio di curva	1188 mm
■ Peso	35 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	CE

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).  
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.  
\*PSC = punto di sollevamento centrale

### VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12  
20045 Lainate MI  
Italia

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
[info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



Per maggiori informazioni potete contattare  
il rivenditore più vicino a voi.