

Club



VERMEIREN
we care for you

Club Family


Una serie de camas que combinan nuestros más de 65 años de experiencia en soluciones de cuidados domiciliarios. La familia Club de **VERMEIREN** se ha diseñado con los aportes de usuarios, empresas de alquiler y profesionales de la salud. Una cama de cuatro planos sencilla y segura para proporcionar confort y cuidados en el hogar.

Ajusta todas las camas Club eléctricamente gracias a sus tres motores Linak™. Ajusta la altura según las necesidades de cada usuario o cuidador para asistencia o transferencias.

La posición (anti) Trendelenburg incluida de serie va un paso más allá, ofreciendo beneficios de salud adicionales cuando el usuario los requiera.



El mando es de uso sencillo tanto para usuarios como para cuidadores, pero puede ser bloqueado para mayor seguridad.

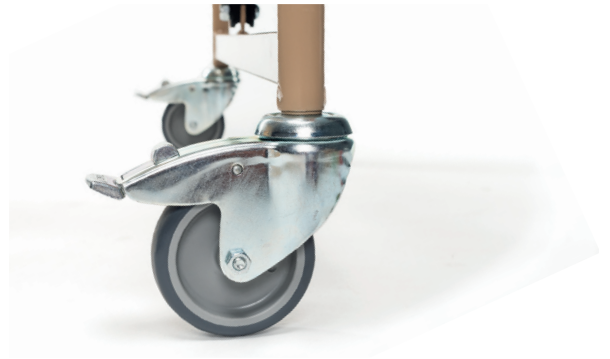


Las 4 ruedas proporcionan maniobrabilidad, y pueden ser bloqueadas para mayor seguridad.

Club VARIO

Club Vario es la versión ajustable en altura de la cama Club. Además de todos los beneficios de Club, la altura de la base puede ajustarse en dos posiciones diferentes.

Elige la altura que mejor se adapte a tu situación o necesidades, y modifícala luego eléctricamente para acomodarse a las diferentes necesidades del día a día.

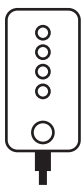

81 cm
74,5 cm
40 cm
33,5 cm

Posición 1: 33,5 cm (ajustable eléctricamente hasta 74,5 cm)

Posición 2: 40 cm (ajustable eléctricamente hasta 81 cm)

Club

Para asegurarte la mejor solución para tu confort, la cama Club ha sido diseñada con múltiples opciones de configuración. Desde la base de lamas al recubrimiento.

DESCUBRE MÁS sobre las características de Club más abajo.



Base de lamas




Lamas metálicas




Lamas de madera

Rastomat (cremallera) opcional

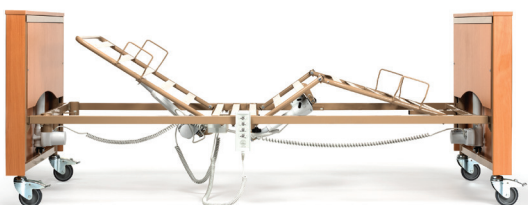

Sin Rastomat (cremallera)

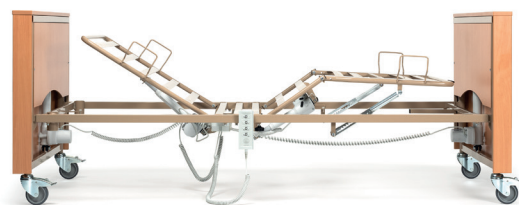

Con Rastomat (cremallera)

Barandillas



Barandillas metálicas



Barandillas partidas (metal o madera)



Barandillas de madera

Paneles de madera

Crea un look moderno añadiendo paneles de madera a Club. Perfectos para dar una imagen más limpia y acogedora a tu cama.




Opciones

Hemos seleccionado para ti las mejores opciones de Club.
Descúbrelas todas aquí.



Un incorporador proporciona soporte adicional a la independencia del usuario para incorporarse o cambiar de postura.

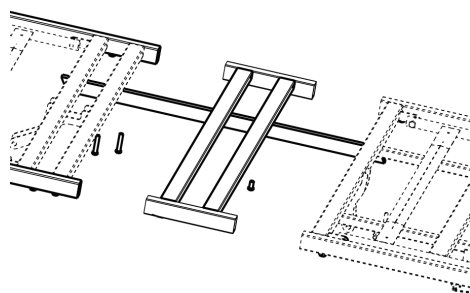

¡Las camas Club están diseñadas para adaptarse a las necesidades de todos!
Añade fácilmente 20 cm a la cama Club con nuestro extensor.



Portasueros



Kit de transporte

La configuración puede variar dependiendo de su región.
Por favor, consulta la hoja de pedido para tener la información más actualizada sobre las opciones disponibles.

Información técnica Club & Club Vario

■ Ancho total	1005; 1037 mm
■ Altura total (sin poste de elevación)	834 - 1262 mm
■ Largo total	2125; 2175 mm
■ Ajuste de la altura de la superficie de la cama (sin colchón)*	400 - 810 mm
■ Ajuste máx. del respaldo	69°
■ Ajuste máx. del muslo	20,7°

■ Ajuste máx. de la parte inferior de las piernas	-16,5°
■ Colchón	RG 35, grosor 120 mm, 2000x900 mm
■ Carga máx. de elevación	80 kg
■ Peso	60,8 kg; 62 kg
■ Peso máximo usuario	165 kg
■ Información adicional	CE

* Club Vario pos. 2. Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.